

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
АППАРАТОМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
«МАТРИКС-МИНИ»
(излучающая головка импульсного излучения ЛО1)

Приложение к книге С.В. Москвина, А.А. Ачилова
«Лазерная терапия аппаратами «Матрикс»

МОСКВА
2009

УДК 615.849.19

ББК 53.54

С92

С92 Схемы лечения аппаратом лазерной терапии «Матрикс-МИНИ» (излучающая головка импульсного излучения ЛО1): Приложение к книге С.В. Москвина, А.А. Ачилова «Лазерная терапия аппаратами «Матрикс». – М.–Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009. – 64 с.
ISBN 978-5-94789-371-7

ББК 53.54

ISBN 978-5-94789-371-7

© С.В. Москвин, А.А. Ачилов, 2009

© Макет ООО «Издательство «Триада», 2009


СОДЕРЖАНИЕ

Ангиология	5
Атеросклероз сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндартериит	5
Венозная недостаточность, варикозное расширение вен нижних конечностей	6
Геморрой	7
Синдром Рейно	8
Гастроэнтерология	9
Гастрит	9
Болезни печени	10
Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей	11
Панкреатит	11
Хронические неспецифические колиты, запоры	12
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки	13
Гинекология	14
Болевые синдромы (эндометриоз, альгодисменорея, тазовые боли)	14
Воспалительные заболевания органов малого таза (эндометрит, сальпингоофорит), эрозия шейки матки	15
Гипофункция яичников (эндокринное бесплодие, гипоменструальный синдром)	16
Гипогалактия.....	17
Мастит	18
Трещины сосков	19
Дерматология	20
Акне (угревая сыпь).....	20
Алопеция	21
Бородавki	22
Воспалительные заболевания без признаков нагноения.....	23
Герпетические поражения.....	24
Грибковые поражения ногтей пластин.....	25
Трофические язвы варикозного или иного происхождения	26
Псориаз.....	27
Экзема, нейродермит	28
Заболевания суставов	29
Артриты и артрозы	29
Миозит, миалгия, тендовагинит	30
Пяточная шпора.....	31
Эпикондилит	32
Кардиология	33
Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь)	33
Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, миокардит, миокардиодистрофия.....	35

Косметология	36
Омоложение кожных покровов лица и шеи	36
Целлюлит	37
Неврология	38
Дисциркуляторная энцефалопатия	38
Заболевания позвоночника (остеохондроз, деформирующий спондилез, спондилоартроз)	39
Невралгия тройничного нерва	40
Невропатия (неврит) лицевого нерва	41
Радикулит пояснично-крестцовый (люмбаго)	42
Последствия нарушения мозгового кровообращения, вертебробазилярная недостаточность	43
Оториноларингология	44
Ангина, тонзиллит	44
Гайморит, фронтит	45
Ринит	46
Острый катаральный средний отит	47
Отосклероз, шум в ушах и снижение слуха	48
Фарингит, ларинготрахеит	49
Хронический мезотимпанит	50
Проктология	51
Трещины заднего прохода	51
Профилактические мероприятия в период эпидемических вспышек гриппа и других ОРВИ	52
Пульмонология	53
Бронхиальная астма	53
Бронхит	54
Стоматология	55
Гингивит, пародонтоз	55
Стоматит	55
Хирургия	56
Поверхностная травма: ушиб, гематома	56
Травматические переломы костей	56
Повреждения капсульно-суставного аппарата: вывих, растяжение	57
Раны травматические, операционные	57
Ожоги и отморожения	58
Урология	59
Пиелонефрит	59
Простатит	60
Уретрит	61
Цистит	62
Энурез	63

Атеросклероз сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндартериит


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин
1–10	3–5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

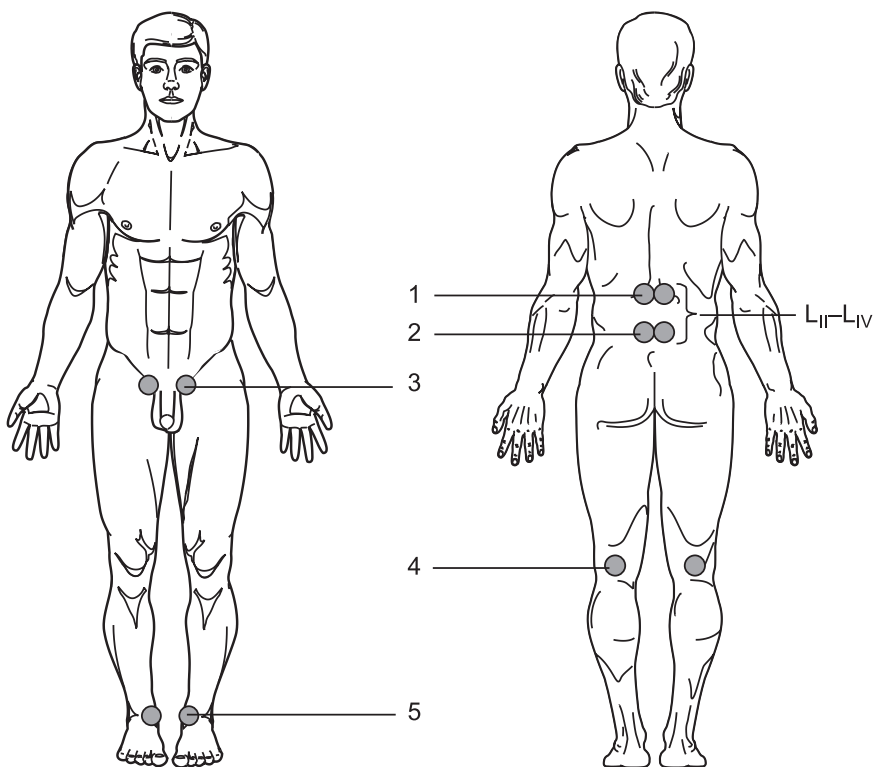

Венозная недостаточность, варикозное расширение вен нижних конечностей

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2, 3, 6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин
1–10	4, 5, 7, 8	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

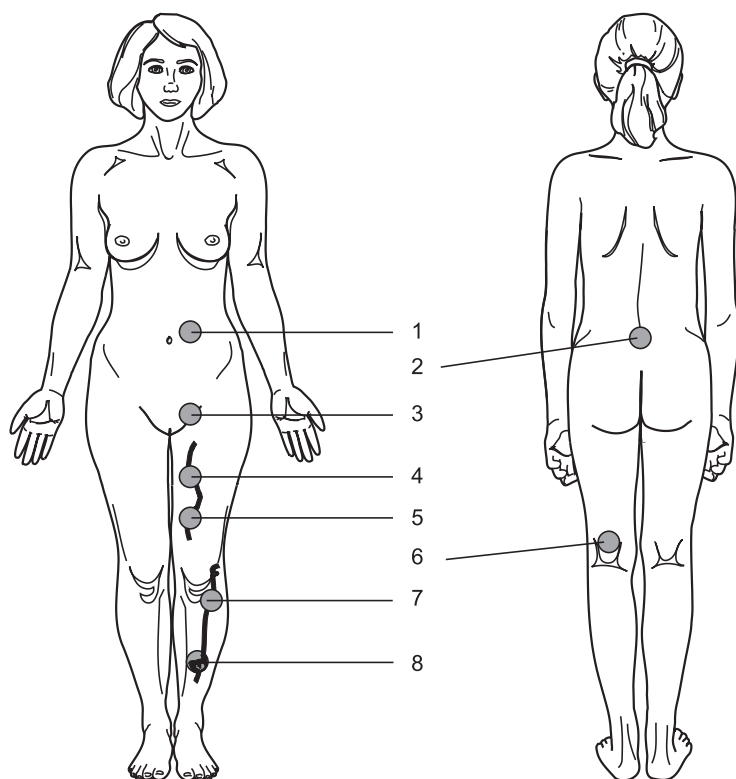

Геморрой

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин
1–10	3	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин
1–10	4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	5 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

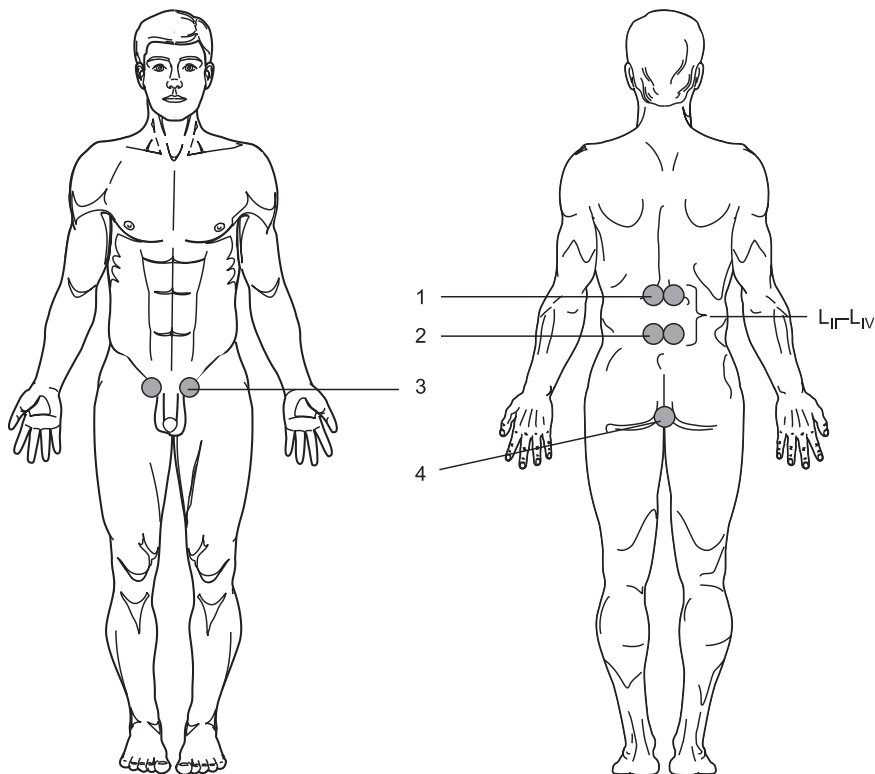

Синдром Рейно

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2, 3, 6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин
1–10	4, 5, 7, 8	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

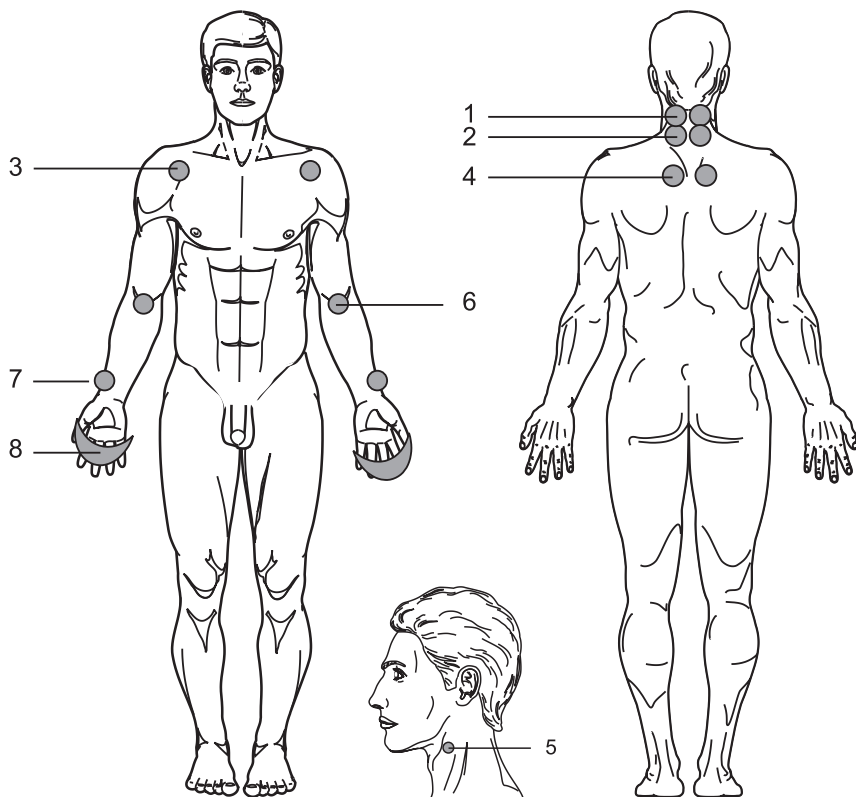

Гастрит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1-14	1-7	Контактно-зеркальная, лабильная	+	-	2 мин (время фиксации на одной зоне)


Последовательно, не отрывая излучатель от поверхности тела.

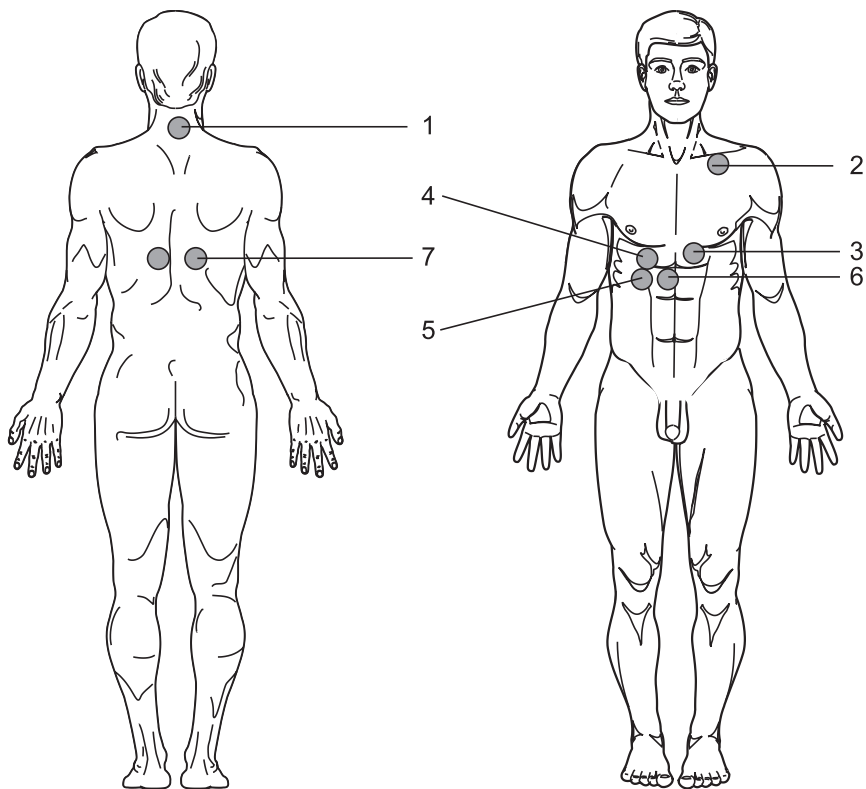

Болезни печени

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1-3	1-3	Контактно-зеркальная, стабильная	+	-	15 с
4-7	1-6	Контактно-зеркальная, стабильная	+	-	2 мин
8-12	1-6	Контактно-зеркальная, стабильная	+	-	1 мин
1-12	7	Контактно-зеркальная, стабильная	-	+	30 с

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3-4 раза в год.

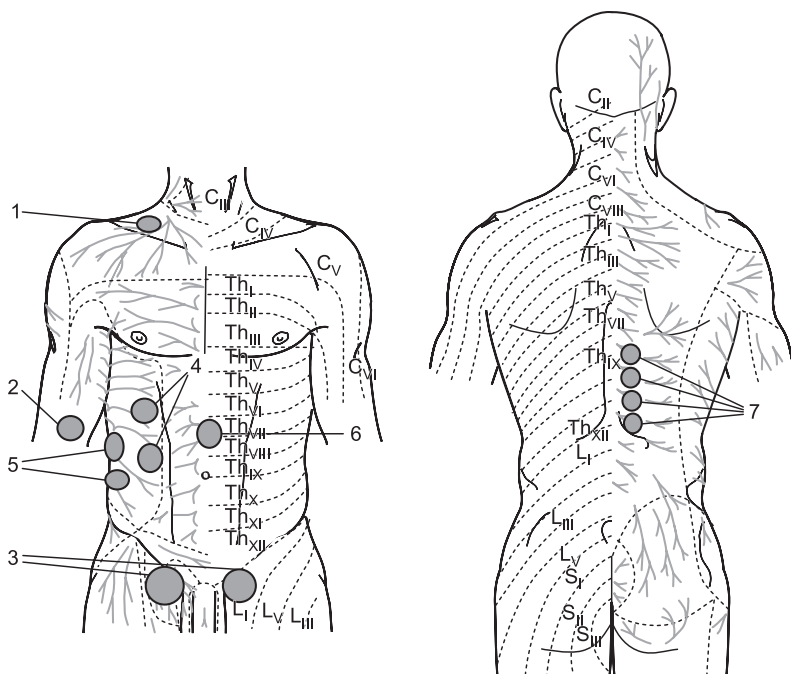

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–12	1–4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

Панкреатит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–12	1–4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

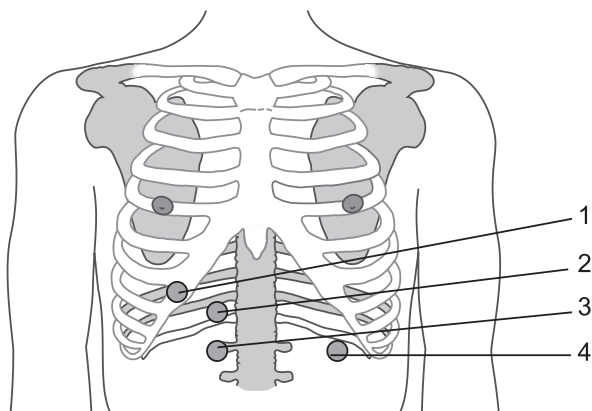

Хронические неспецифические колиты, запоры

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–7	1	Контактно-зеркальная, лабильная	–	+	5 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

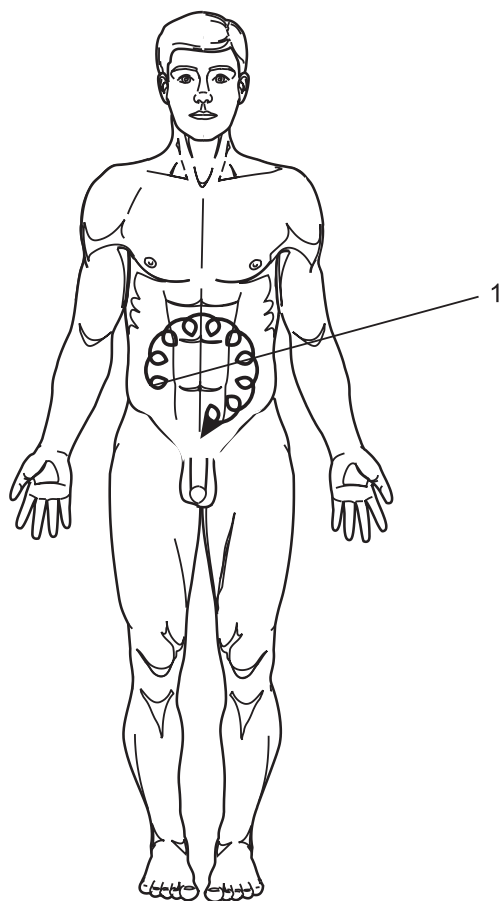

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1-14	1-7	Контактно-зеркальная, лабильная	+	-	2 мин (время фиксации на одной зоне)


Последовательно, не отрывая излучатель от поверхности тела.

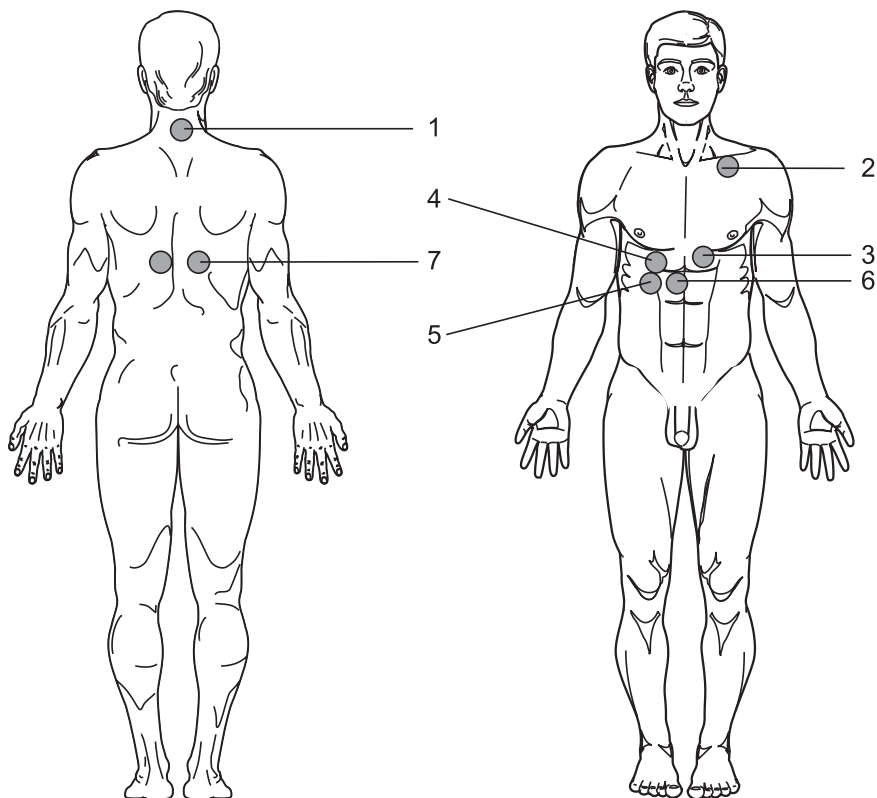

Болевые синдромы (эндометриоз, альгодисменорея, тазовые боли)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–5	3, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин
1–5	6	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин


Процедуры проводить только по назначению и под наблюдением врача.

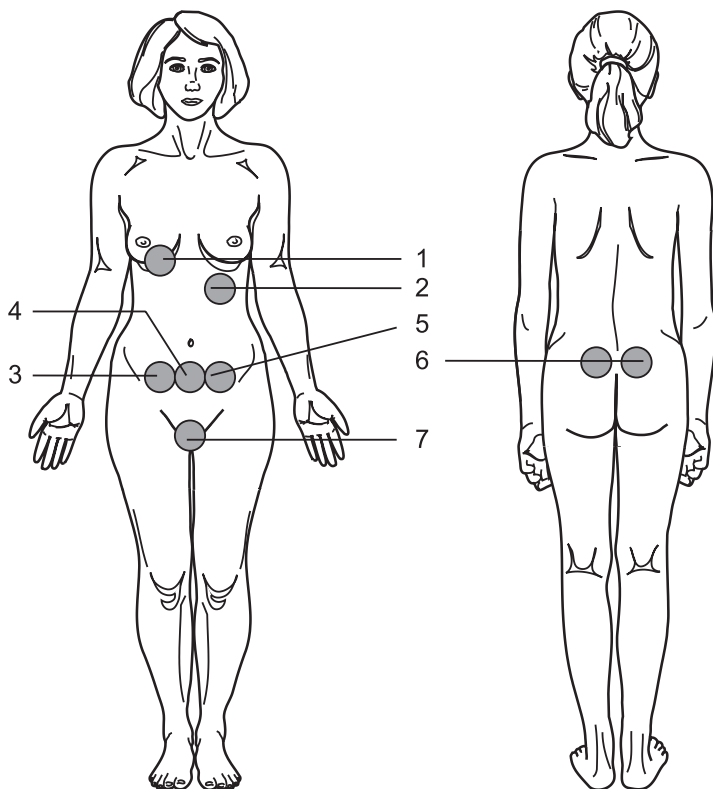

Воспалительные заболевания органов малого таза
(эндометрит, сальпингоофорит), эрозия шейки матки

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	3, 4, 5, 7	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин
1–10	6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин


Процедуры проводить только по назначению и под наблюдением врача.

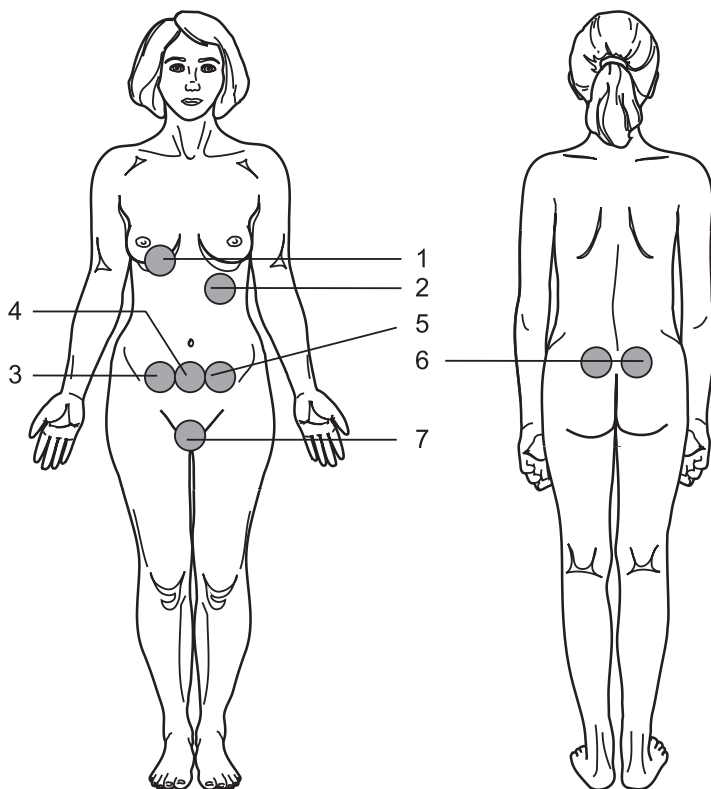

Гипофункция яичников (эндокринное бесплодие, гипоменструальный синдром)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	3, 4, 5, 7	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин
1–10	6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин


Процедуры проводить только по назначению и под наблюдением врача.

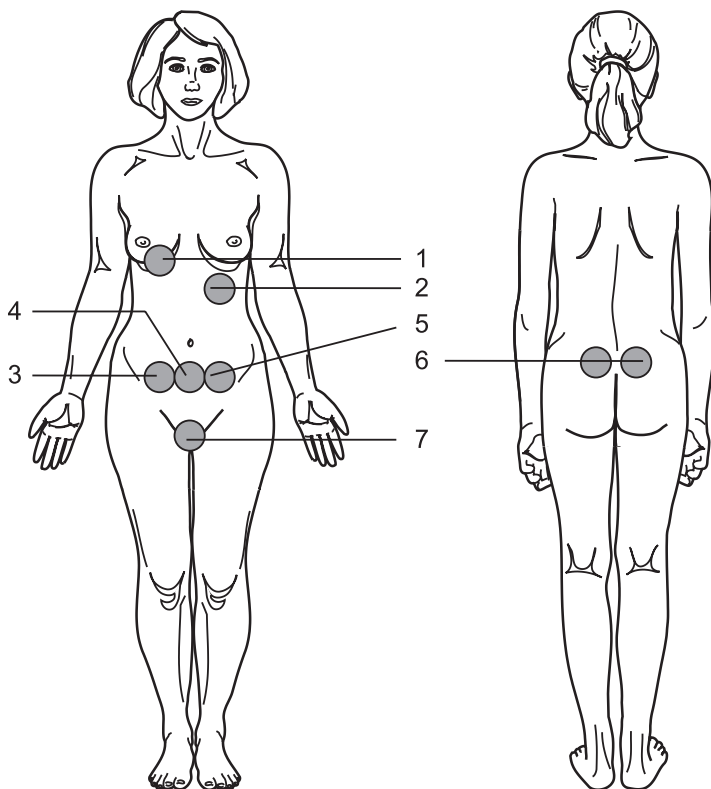

Гипогалактия

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–5	2	Контактно-зеркальная, лабильная, круговым движением по часовой стрелке	–	+	1,5–2 мин

Противопоказания: фиброзно-кистозная мастопатия узловая, смешанная с преобладанием кистозного компонента.

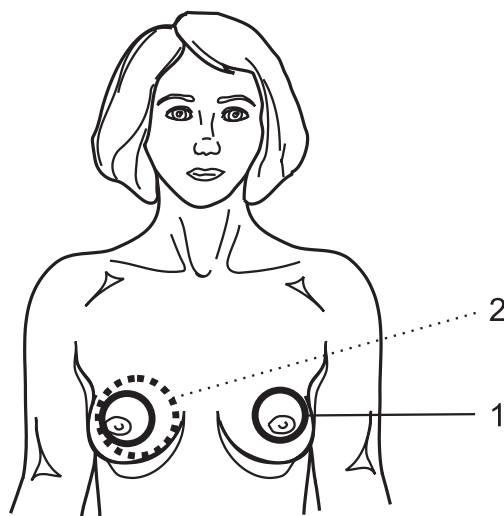


Мастит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1 (вокруг)	Контактно-зеркальная, стабильная, последовательно воздействуют на верхненаружный, верхневнутренний, нижневнутренний и нижненаружный квадранты молочной железы	–	+	По 1,5–2 мин на каждую зону

Сцеживание рекомендуется производить в течение часа после магнитолазерного воздействия.


Противопоказания: фиброзно-кистозная мастопатия узловая, смешанная с преобладанием кистозного компонента.

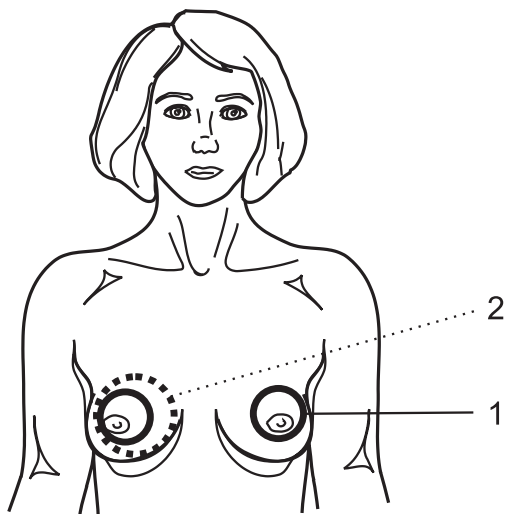

Трещины сосков

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


Противопоказания: фиброзно-кистозная мастопатия узловая, смешанная с преобладанием кистозного компонента.

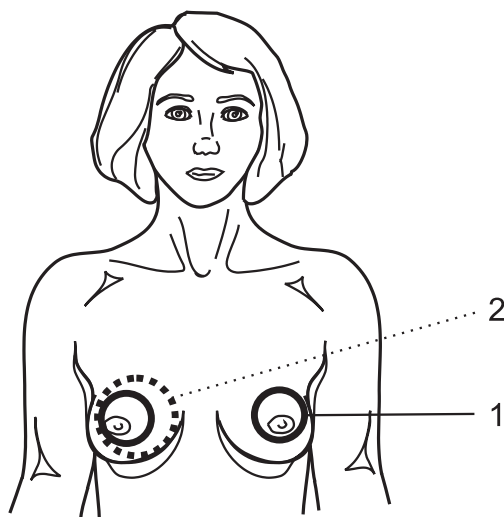

Акне (угревая сыпь)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зона поражения, щеки	Контактно-зеркальная, лабильная, последовательно по направлениям	+	–	5 мин (общее время)

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

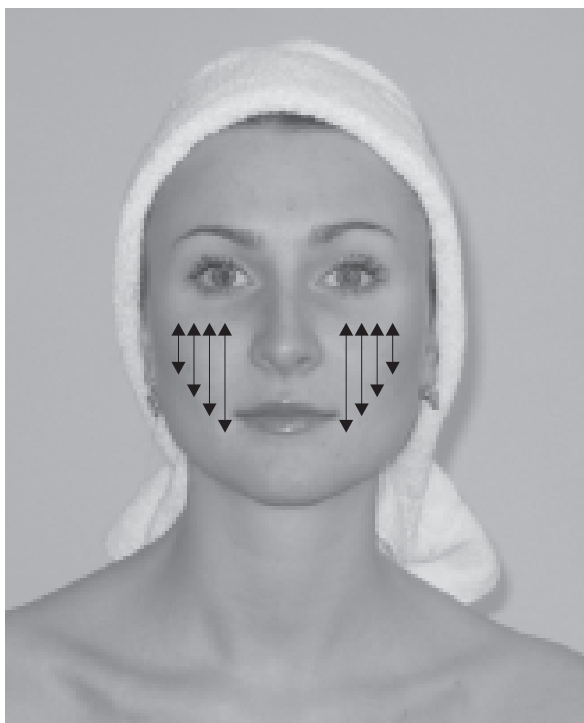

Алопеция

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10, курсы повторяют через 3 мес.	Макушка	Контактно-зеркальная, лабильная, по спирали от макушки кнаружи	+	–	5 мин (общее время)


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.



Бородавки

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зоны поражения (не более 5 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин (время фиксации на одной зоне)
1–10	1, 2, 3	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

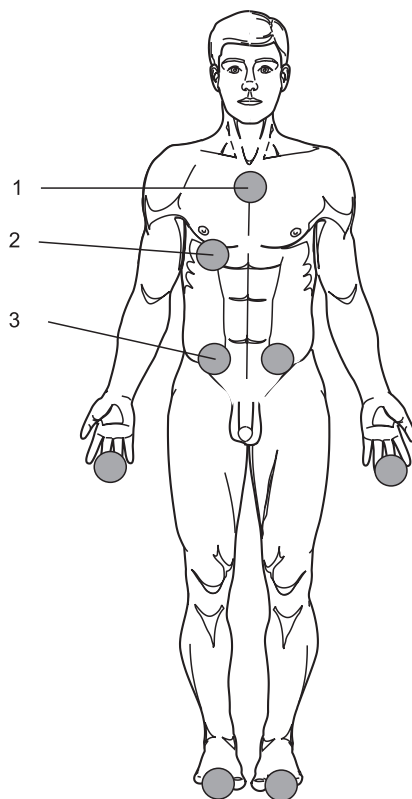

Воспалительные заболевания без признаков нагноения

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зоны поражения (не более 5 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин (время фиксации на одной зоне)
1–10	1, 2, 3	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

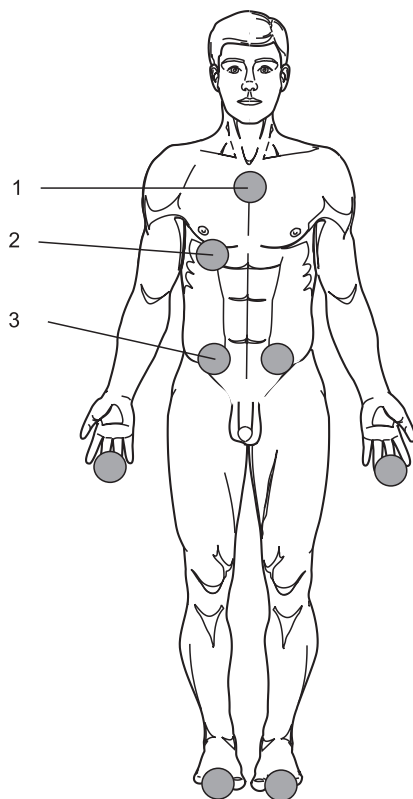

Герпетические поражения

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зоны поражения (не более 5 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин (время фиксации на одной зоне)
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

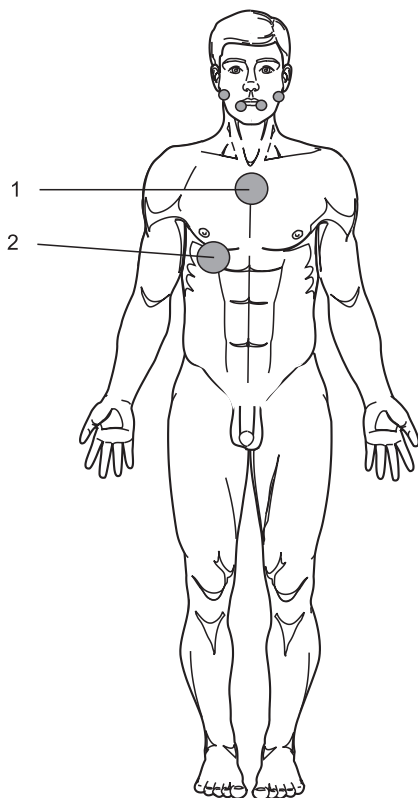

Грибковые поражения ногтей пластин


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зоны поражения, ногтевые пластины (не более 5 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин (время фиксации на одной зоне)
1–10	1, 2, 3	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

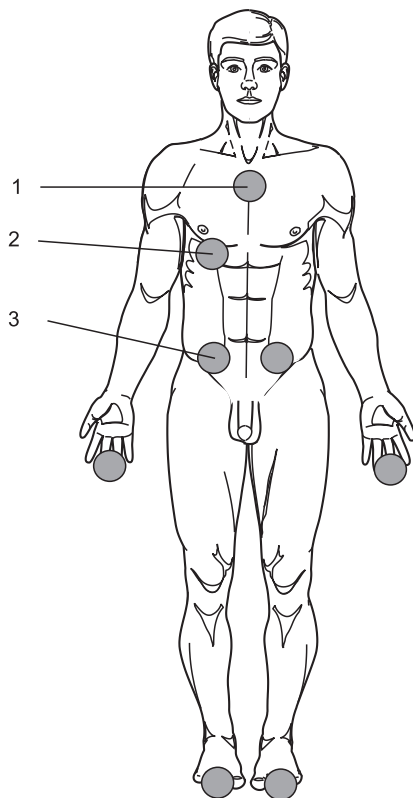

Трофические язвы варикозного или иного происхождения


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин
1–10	3–4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин
1–10	5 (зоны поражения симметрично)	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

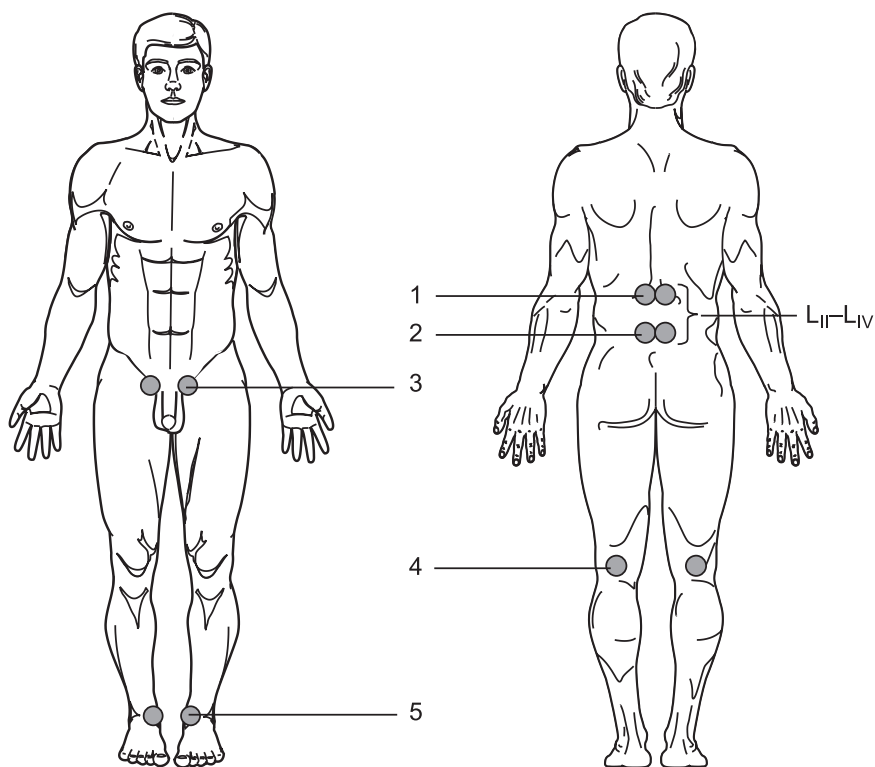

Псориаз

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	Зоны поражения (не более 4 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	4 мин (время фиксации на одной зоне)
1–14	1	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин



Повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

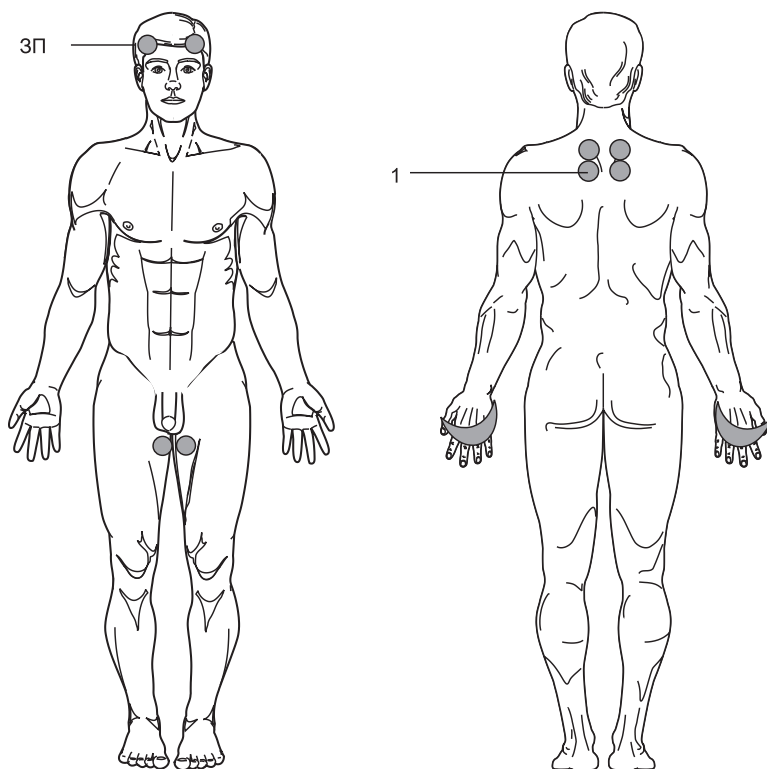

Экзема, нейродермит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	Зоны поражения (не более 4 зон за сеанс)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	4 мин (время фиксации на одной зоне)
1–14	1	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин


Повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

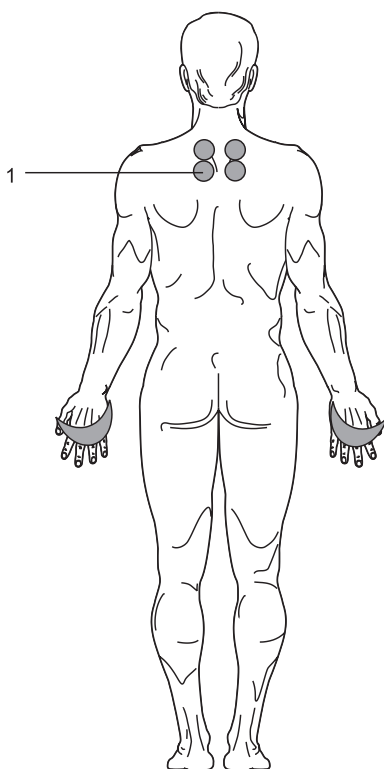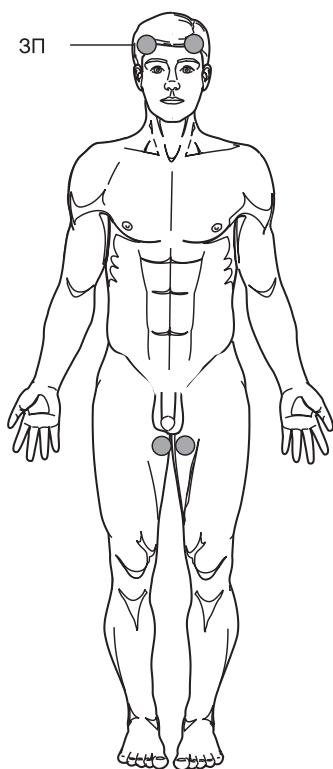

Артриты и артрозы

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–5 (в зависимости от локализации)	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин


Профилактические курсы проводить 2 раза в год весной и осенью.

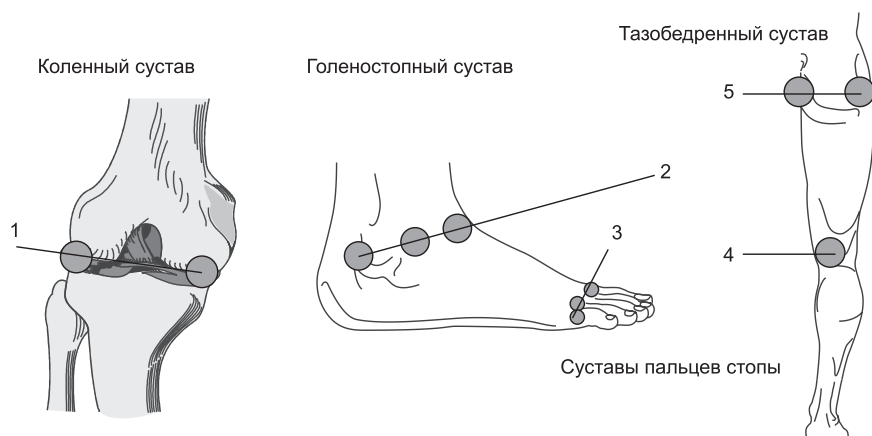

Миозит, миалгия, тендовагинит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 3	Контактно-зеркальная, лабильная	–	+	2 мин
1–10	2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

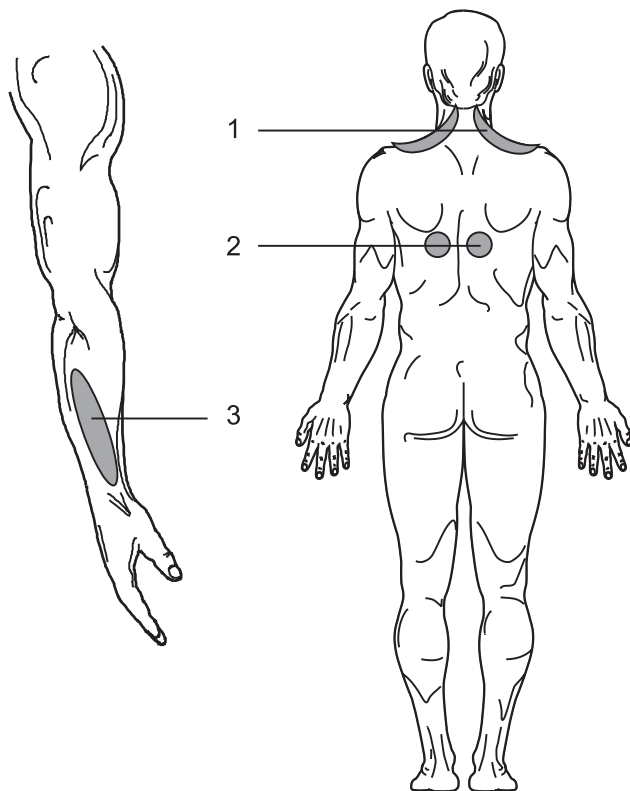

Пяточная шпора

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2, 3	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

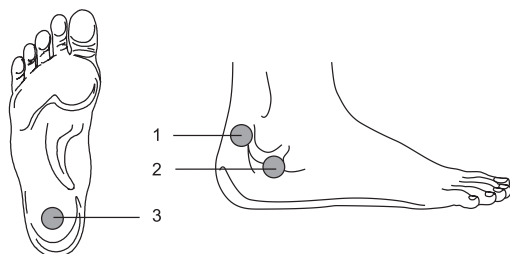

Эпикондилит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин
1–10	2	Контактно-зеркальная, лабильная	–	+	2 мин
1–10	3	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

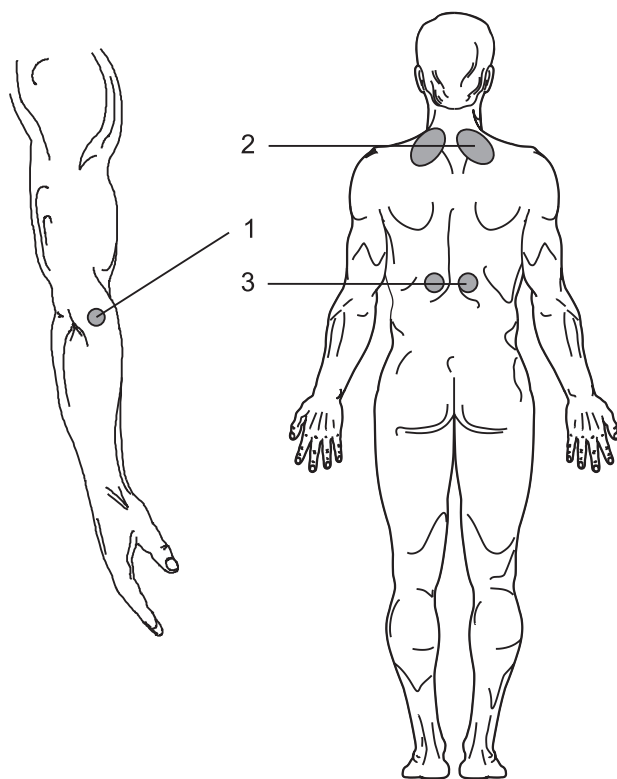

Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин
1	2	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	1 мин
2	Как в 1-й процедуре				
3	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин
4	Как в 3-й процедуре				
5	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин
5	2	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	3 мин
6	Как в 5-й процедуре				
7	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин
7	2	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	4 мин
8	Как в 7-й процедуре				
9	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	2 мин
9	2	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	2 мин
10	Как в 9-й процедуре				
11	1, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин
11	2	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	2 мин
12	Как в 11-й процедуре				


Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь)

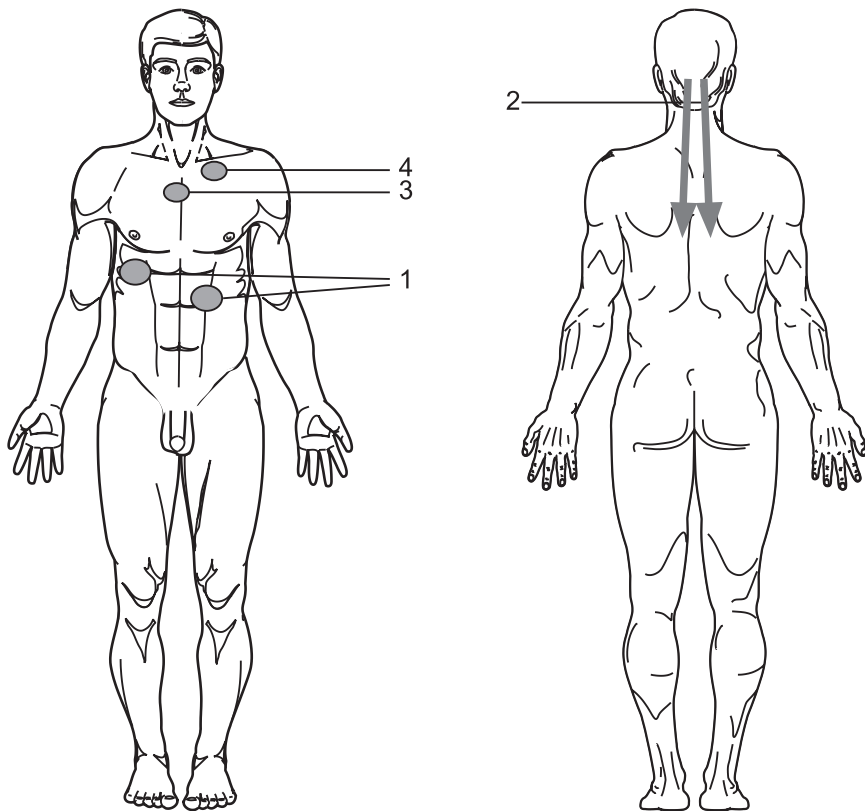

Ишемическая болезнь сердца, стенокардия,
перенесенный в прошлом инфаркт миокарда,
миокардит, миокардиодистрофия

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–8	1–6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

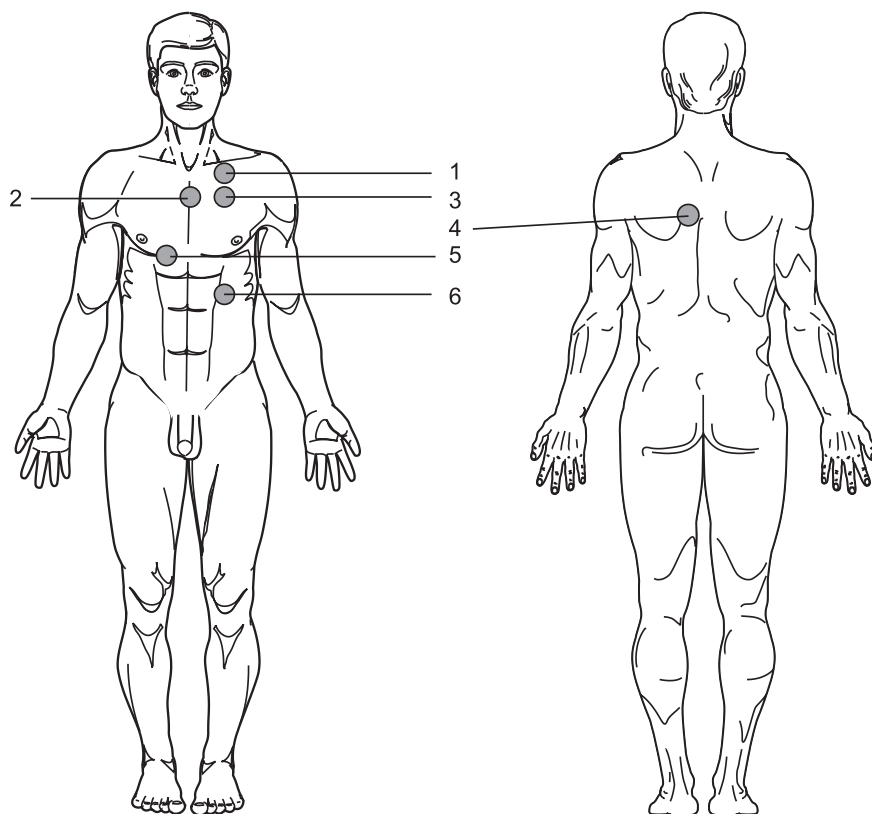

Омоложение кожных покровов лица и шеи

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зона щек и шеи симметрично	Контактно-зеркальная, лабильная, последовательно по направлениям	+	–	5 мин (общее время)


Водить сканирующим движением со скоростью 1–2 см в секунду.

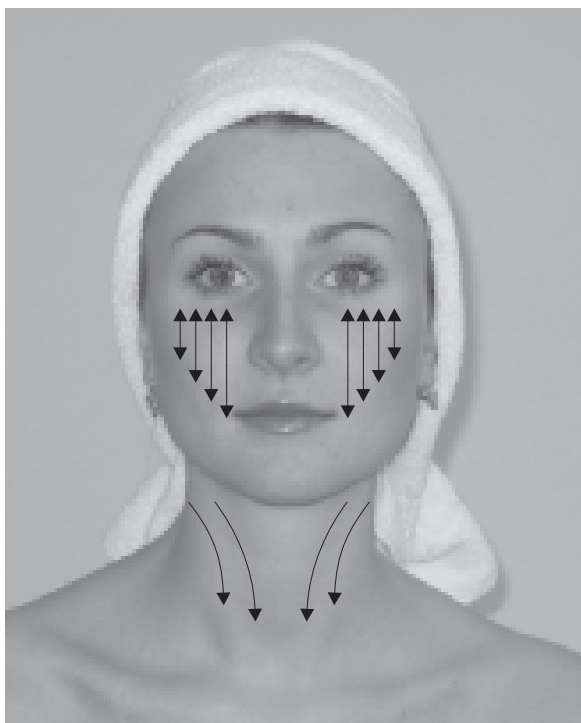

Целлюлит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	Зона ягодиц симметрично	Контактно-зеркальная, лабильная, последовательно по направлениям	+	–	10 мин (общее время)


Водить сканирующим движением со скоростью 1–2 см в секунду.

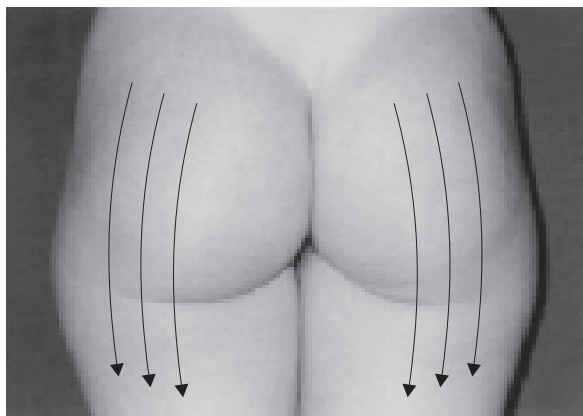

Дисциркуляторная энцефалопатия

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1 (симметрично)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	5 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

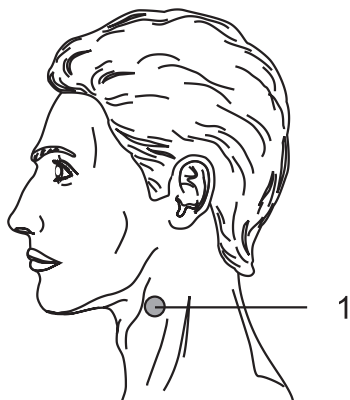

Заболевания позвоночника
(остеохондроз, деформирующий спондилез,
спондилоартроз)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин



По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

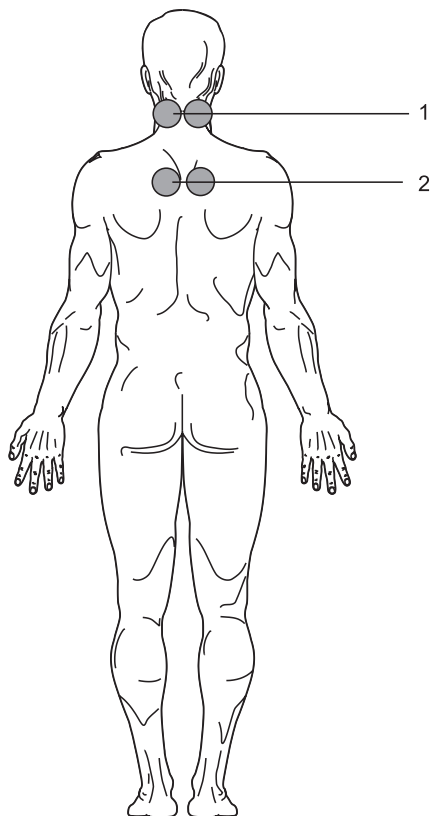

Невралгия тройничного нерва

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2, 3	Контактно-зеркальная, лабильная	+	–	2 мин
1–10	4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

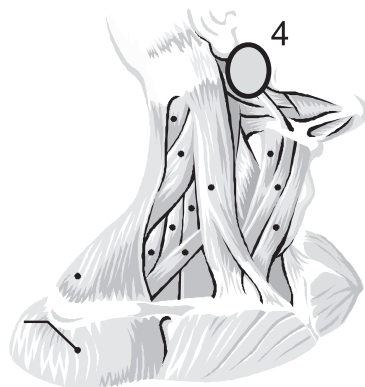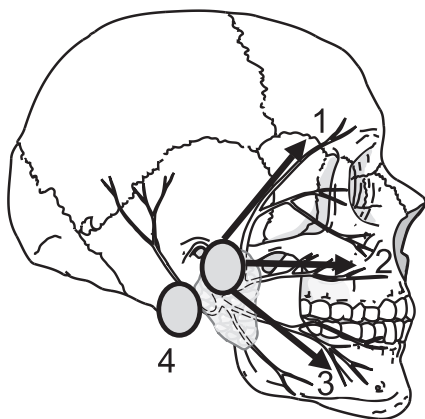

Невропатия (неврит) лицевого нерва

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

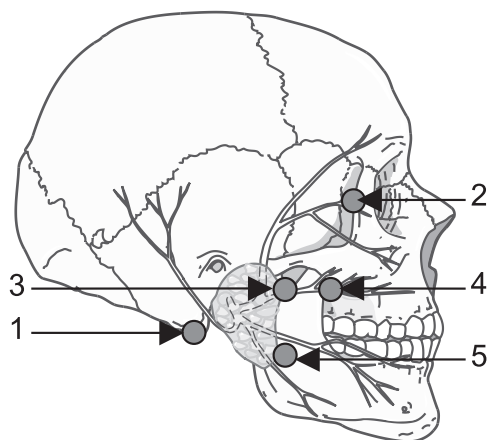

Радикулит пояснично-крестцовый (люмбаго)

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	5 мин
1–10	2, 3	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

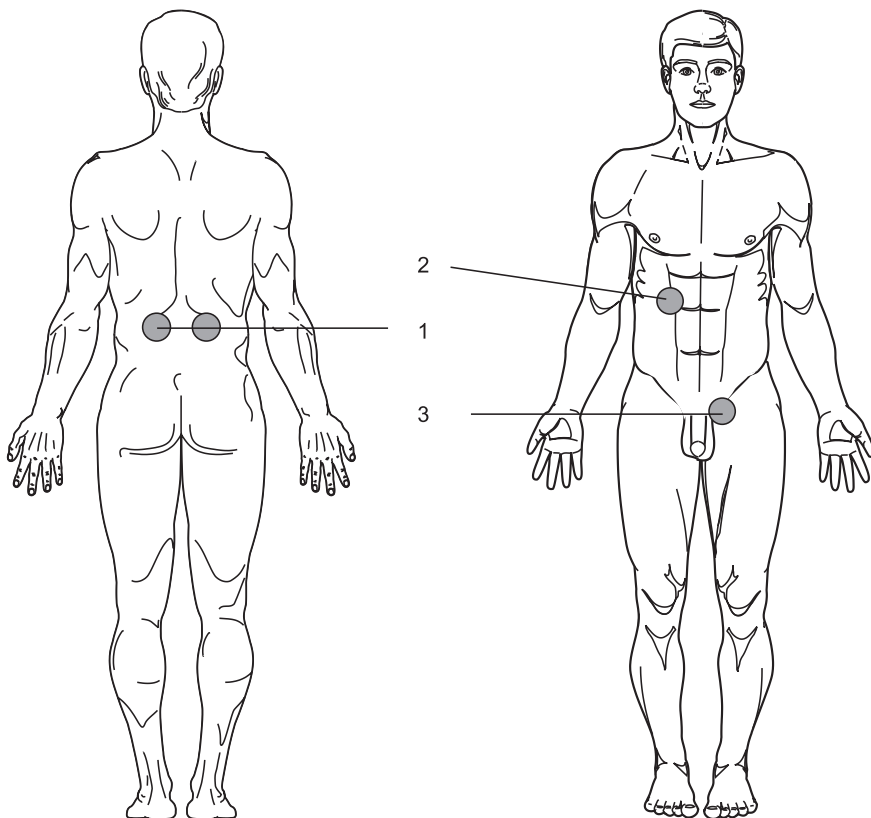

Последствия нарушения мозгового кровообращения,
вертебробазилярная недостаточность

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1 (симметрично)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	5 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

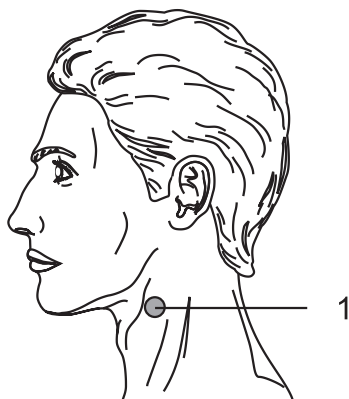

Ангина, тонзиллит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	2, 4, 5, 7, 8	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

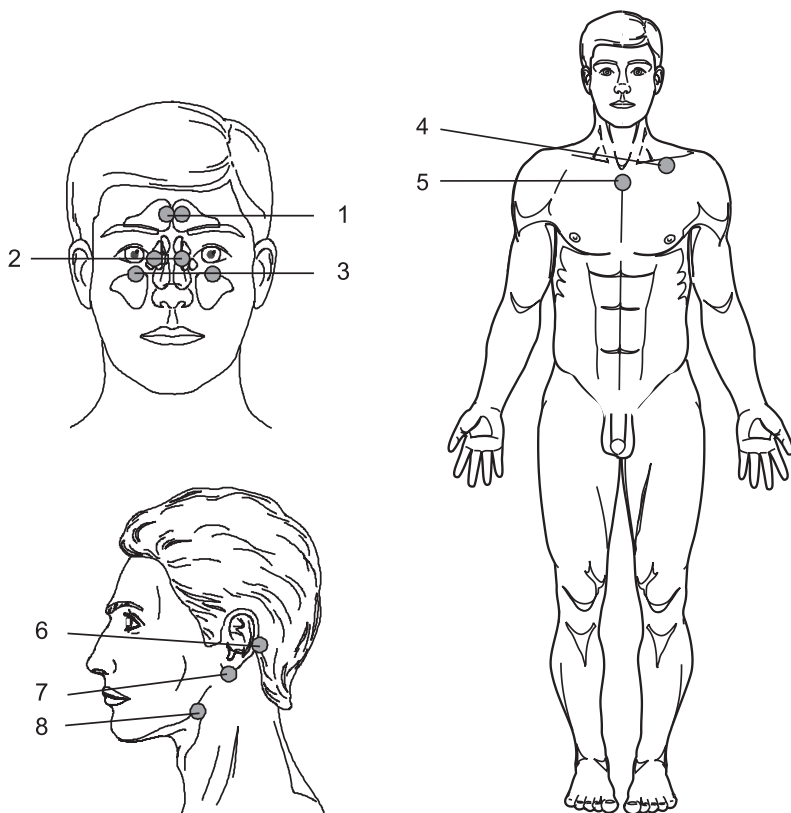

Гайморит, фронтит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин
1–10	3, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин


При наличии гнойного содержимого в пораженной пазухе ежедневно перед процедурой ЛТ обязательно необходимо делать промывание и эвакуацию гноя.

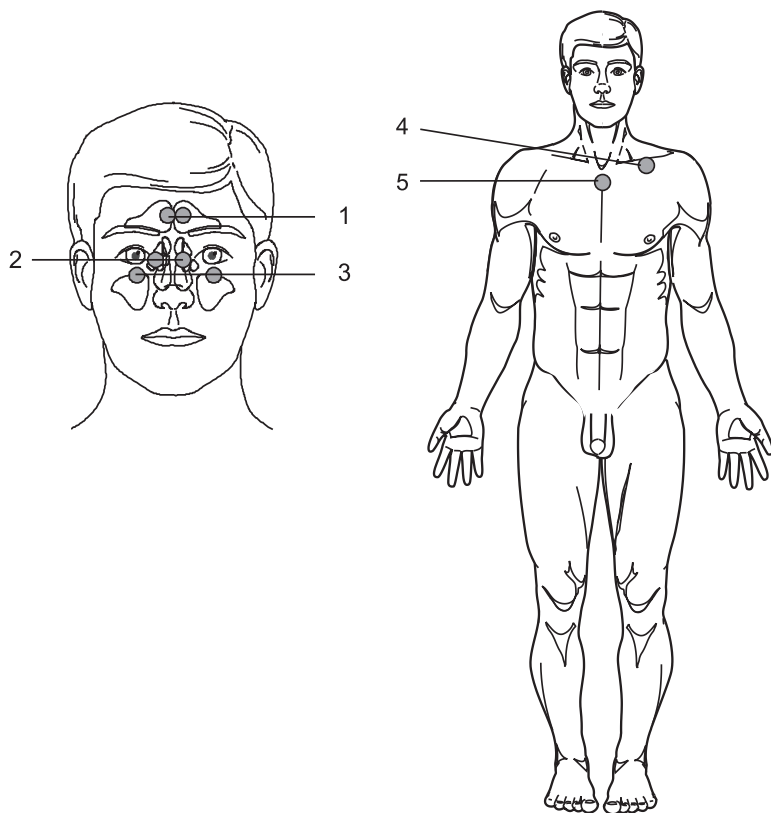

Ринит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	2, 3, 8, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

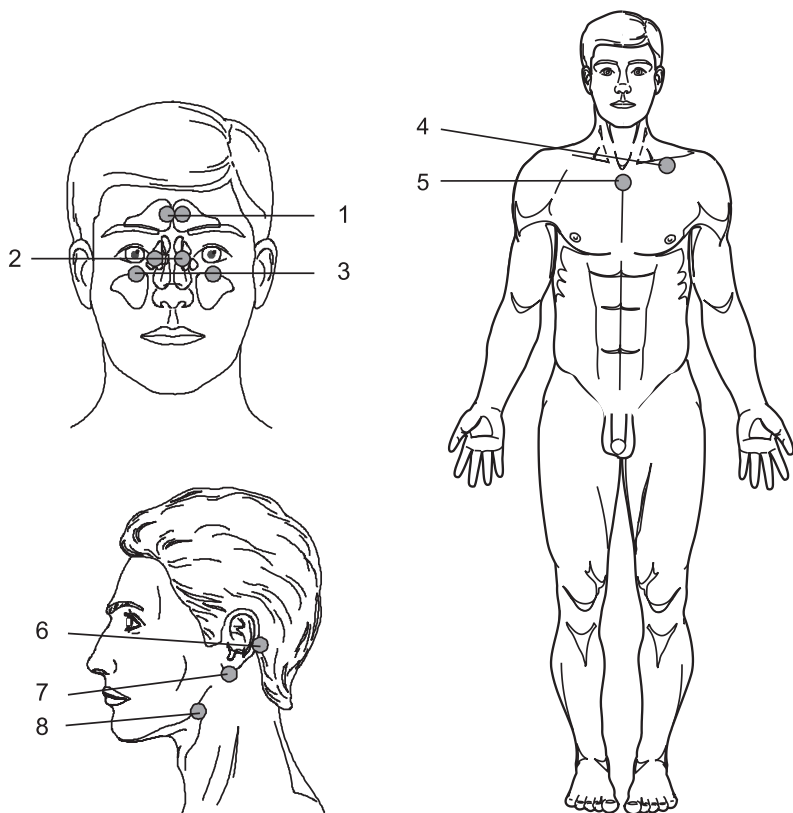

Острый катаральный средний отит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	6, 7, 8, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин




По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

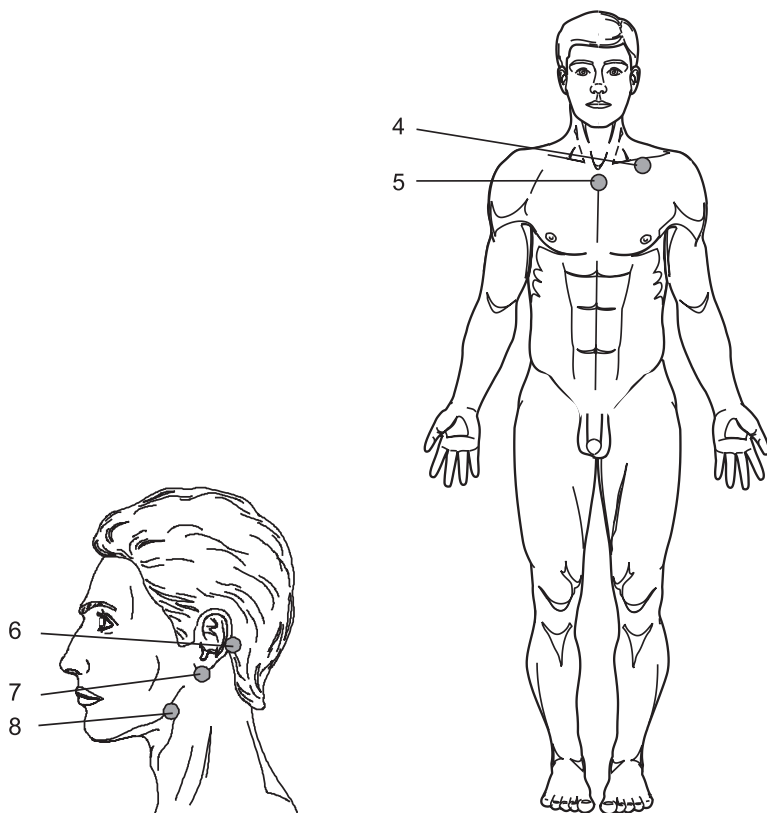

Отосклероз, шум в ушах и снижение слуха

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	6, 7, 8, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

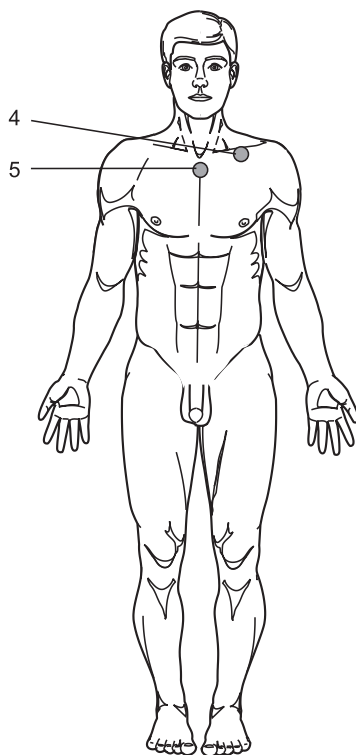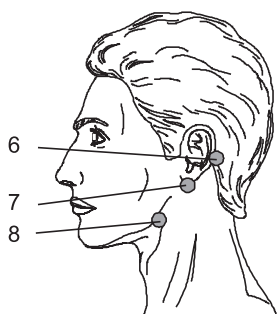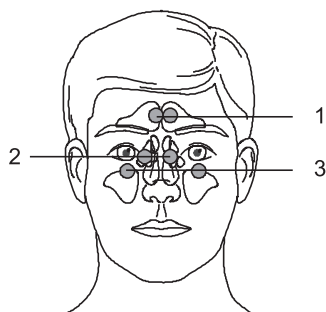

Фарингит, ларинготрахеит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	2, 4, 5, 7, 8	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

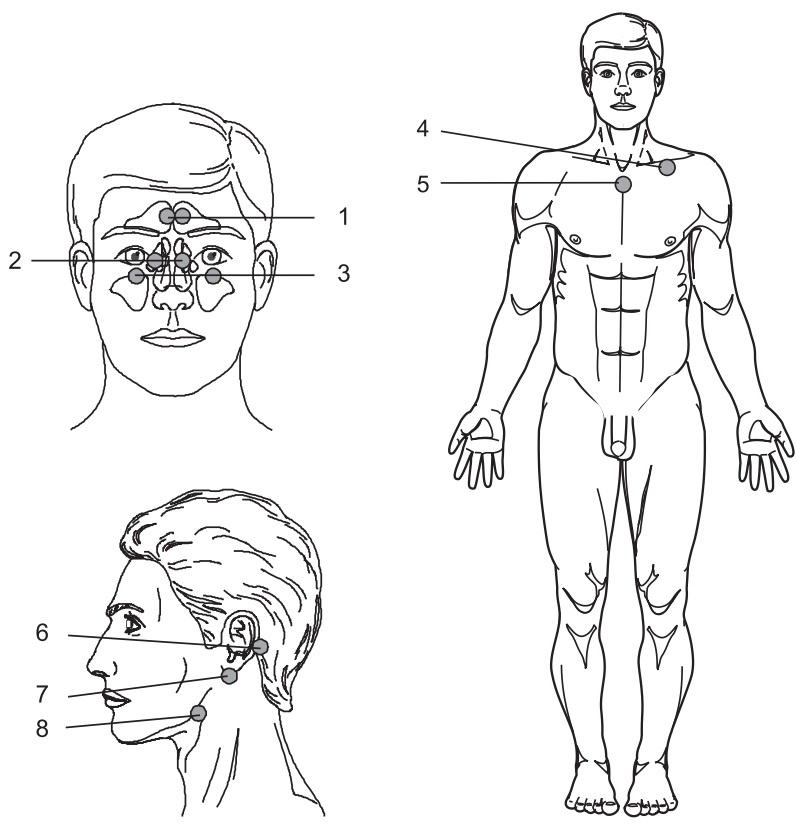

Хронический мезотимпанит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	6, 7, 8, 4, 5	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

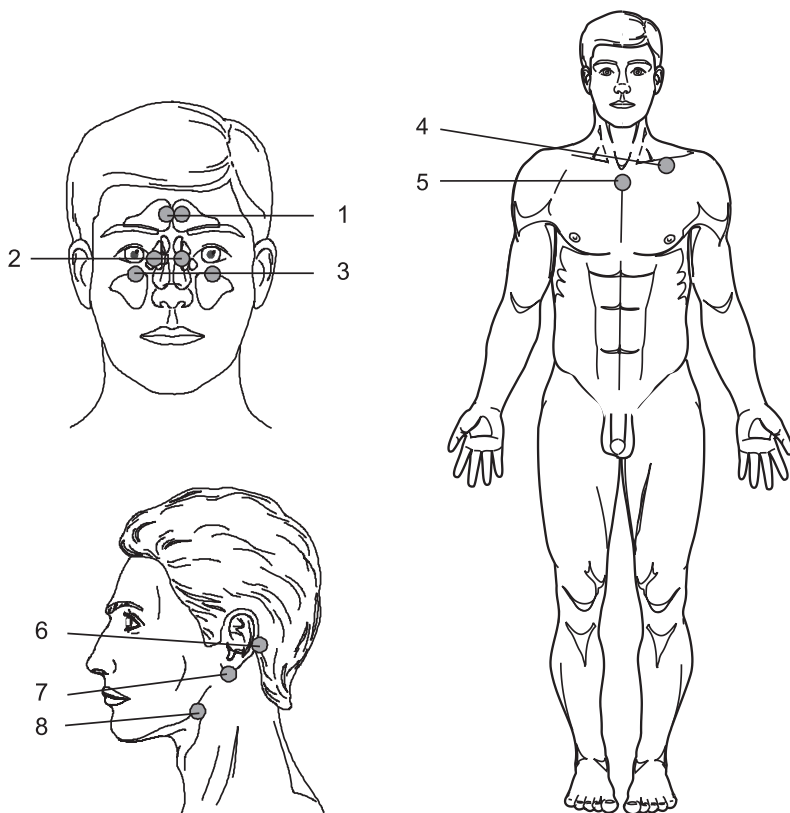

Трещины заднего прохода

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин
1–10	2 (задний проход)	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	5 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

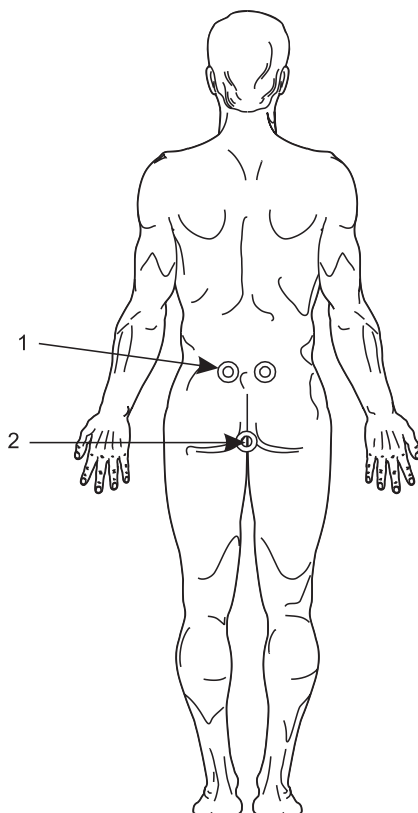

Профилактические мероприятия в период эпидемических вспышек гриппа и другие ОРВИ

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–4	1	Контактно-зеркальная, стабильная	+	–	1 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

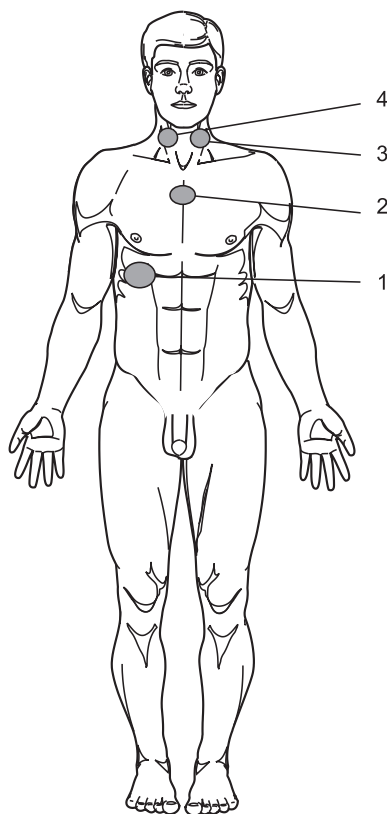

Бронхиальная астма

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–12	2, 3, 4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

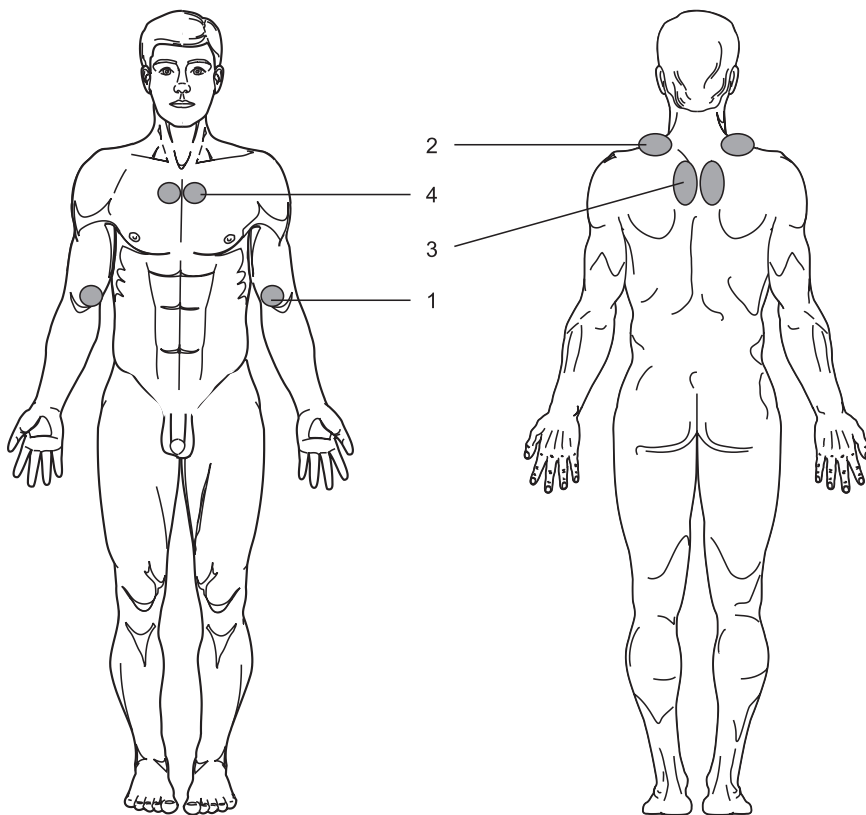

Бронхит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–12	1–5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

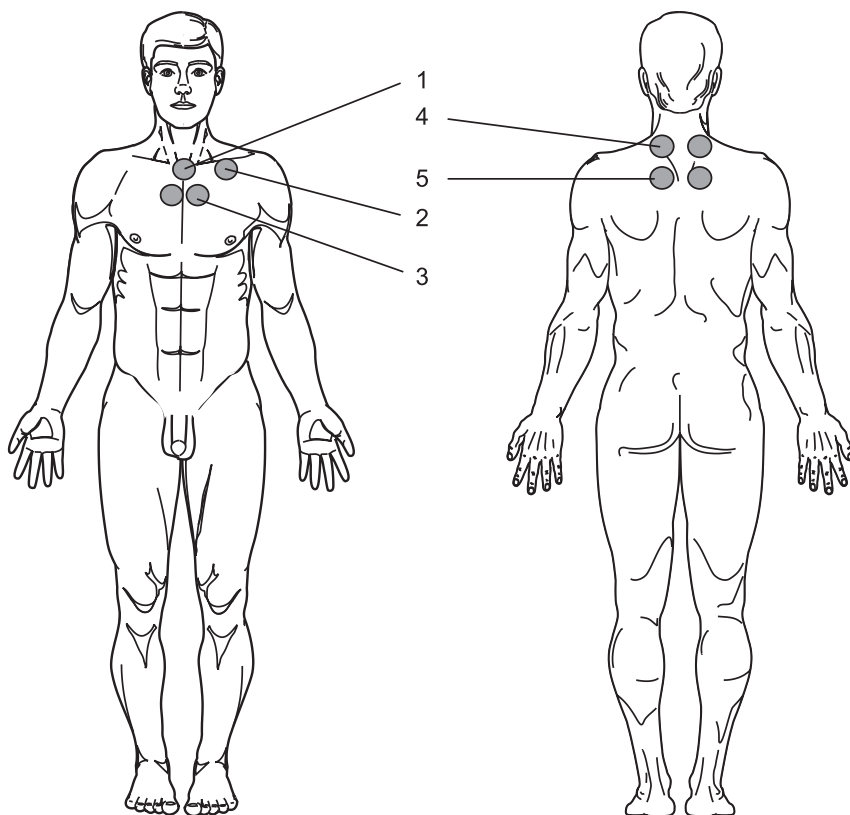

Гингивит, пародонтоз


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–12	1–5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

Стоматит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–7	1–5	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

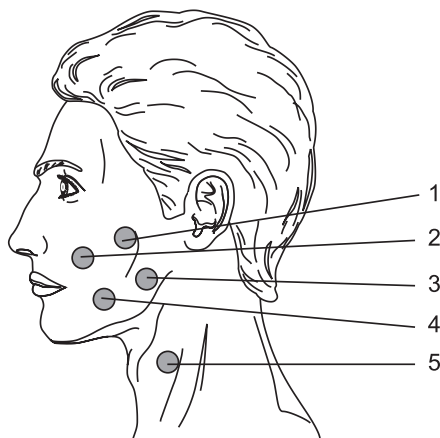

Поверхностная травма: ушиб, гематома


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–4, область ушиба	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

Травматические переломы костей

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–4, на область перелома через гипс	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

Проводится в послеоперационный период.

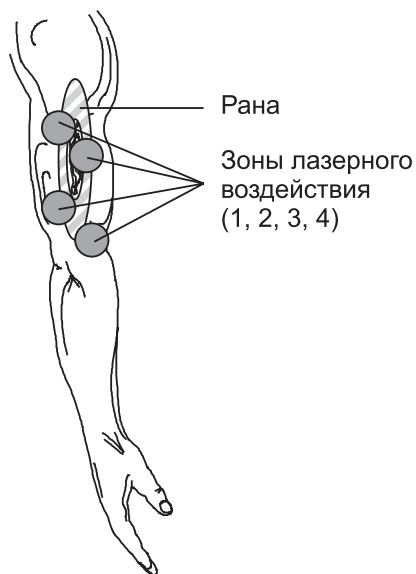

Повреждения капсульно-суставного аппарата: вывих, растяжение


Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–4, область вывиха, растяжения	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

Раны травматические, операционные

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–4, область раны	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

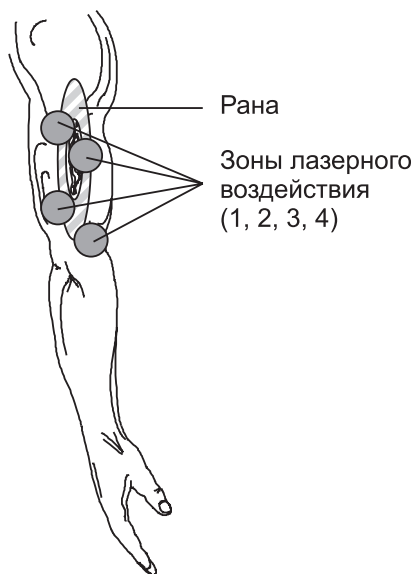

Ожоги и отморожения

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1–4, область ожога	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

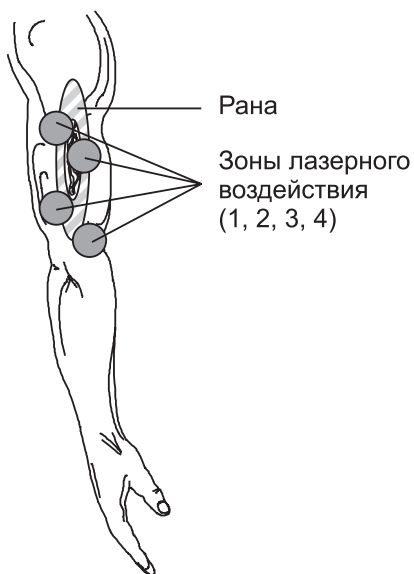

Пиелонефрит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–10	1, 2	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

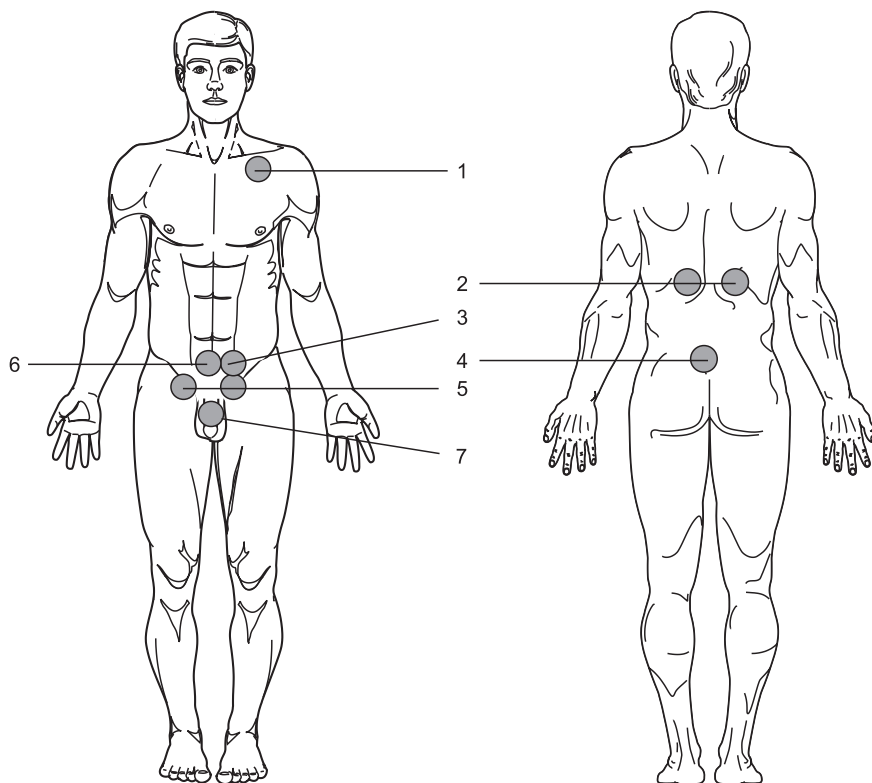

Простатит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	4	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	5 мин
1–14	5, 7	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

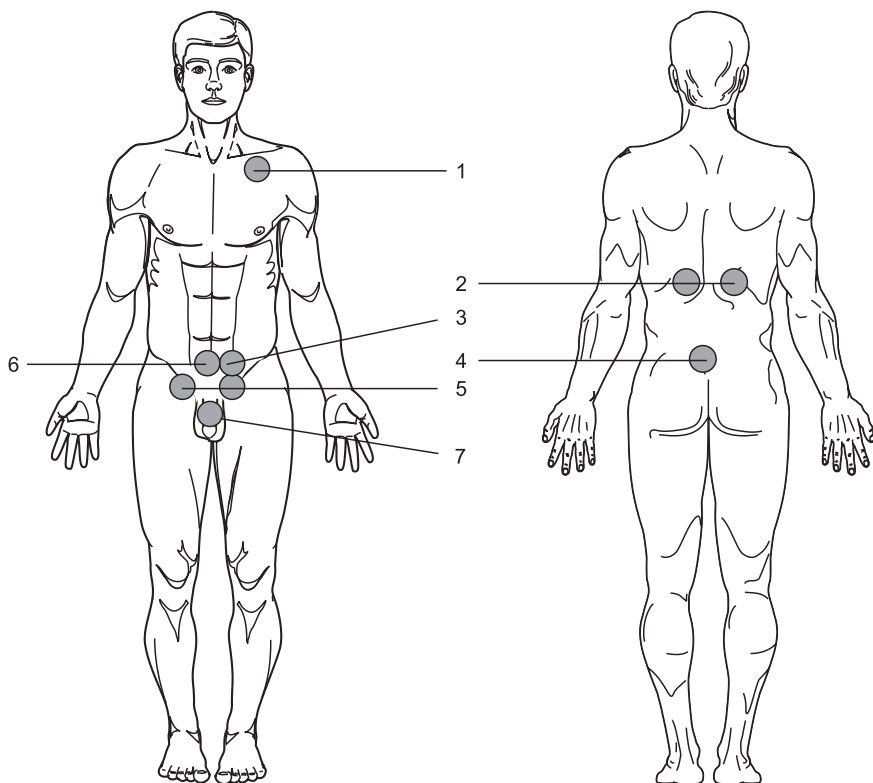

Уретрит

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	1, 4, 5, 7	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

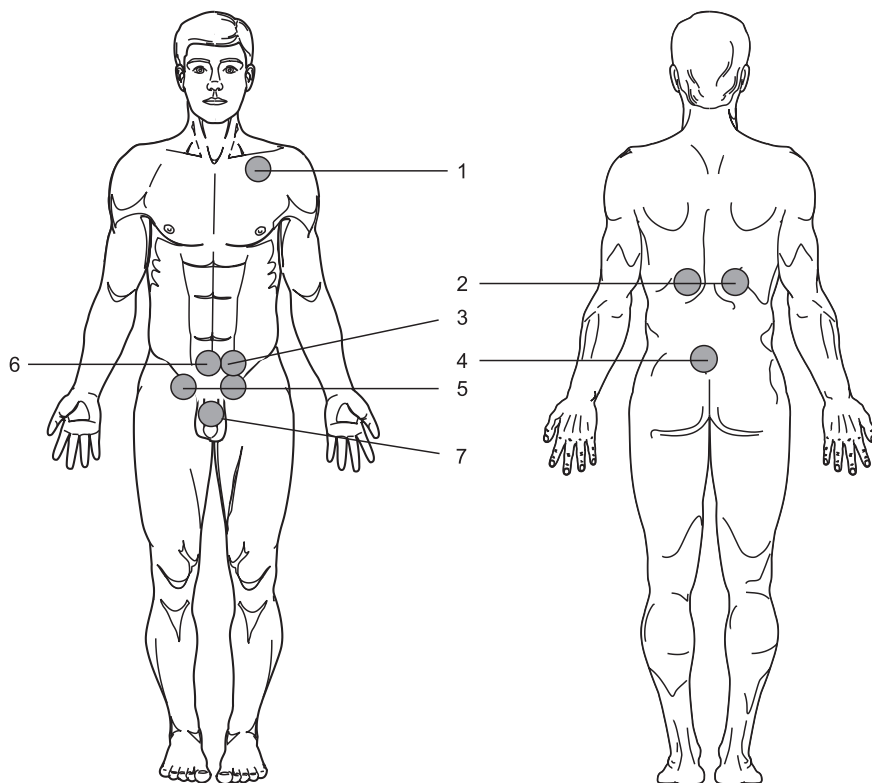

ЦИСТИТ

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	1, 3, 4, 5, 6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин


По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

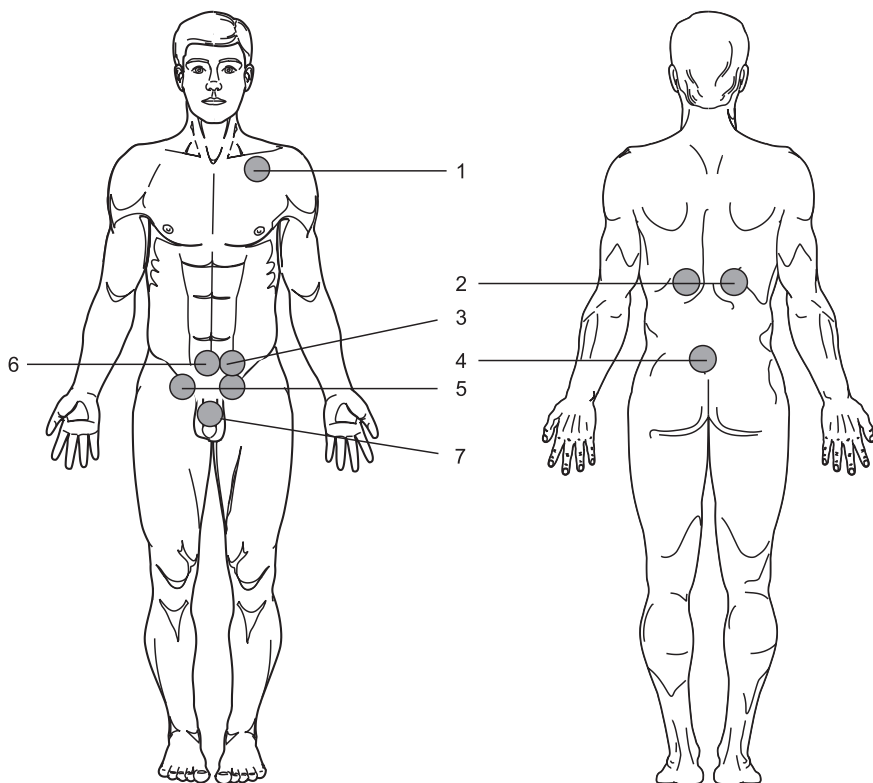

Энурез

Процедуры	Зоны воздействия	Методика	Зеркальная насадка ЗН-35	Магнитная насадка ЗМ-50	Время воздействия
1–14	3, 4, 5, 6	Контактно-зеркальная, стабильная	–	+	1,5–2 мин

По необходимости повторный курс через 2 мес., 3–4 раза в год.

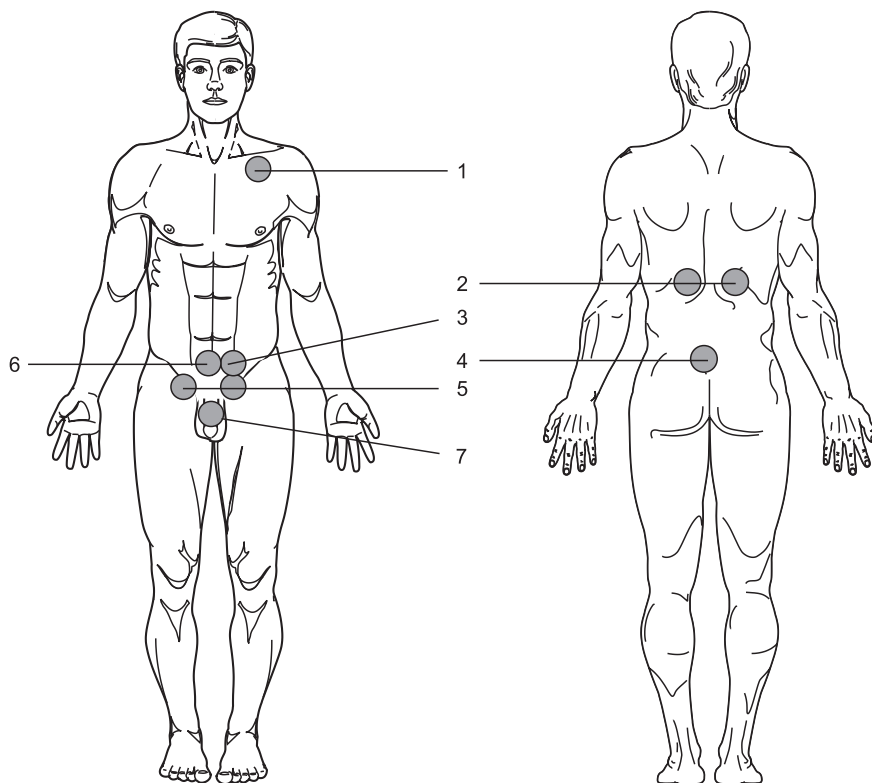

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
АППАРАТОМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
«МАТРИКС-МИНИ»
(излучающая головка импульсного излучения ЛО1)

Приложение к книге С.В. Москвина, А.А. Ачилова
«Лазерная терапия аппаратами «Матрикс»

Подписано к печати 29.10.2009. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4. Тираж 3000 экз.

ООО «Издательство «Триада». ИД № 06059 от 16.10.01 г.
170034, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 9, оф. 504.
Тел./факс: (4822) 42-90-22, 35-41-30. E-mail: triada@stels.tver.ru
<http://www.triada.tver.ru>
Заказ

Отпечатано в филиале ОАО «ТОТ» Ржевская типография
(г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91)